



Extraction



1. Extraire avec précaution la dent en observant une technique atraumatique.

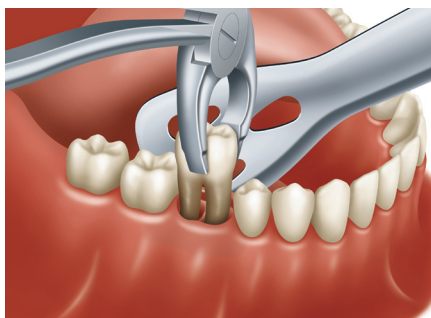

2. Le pansement dentaire HemCon est d'une efficacité optimale lorsque la quantité de sang est suffisante pour mouiller la surface de contact. Si une irrigation ou une aspiration est utilisée, attendre de que le sang remplisse l'alvéole avant de poser le pansement.

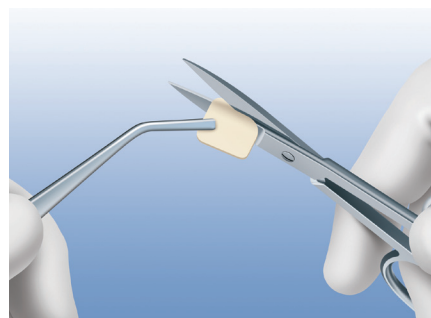

3. Découper le pansement dentaire HemCon de sorte à ce qu'il s'adapte à l'intérieur de l'alvéole d'extraction sans trop la combler.

Remarque : Les deux côtés du pansement sont actifs.



4. Avec un instrument sec et propre, poser le pansement découpé dans l'alvéole d'extraction. Le haut du pansement doit être au même niveau que la gencive crestale. Ne pas bourrer de force le pansement dans l'apex de l'alvéole.

Remarque : Pour éviter d'adhérer à l'instrument, vérifier que celui-ci est bien sec.



5. Les pansements dentaires HemCon sont autoadhésifs en raison de leur charge en ions positifs. Dès qu'il est posé, le pansement commence à refermer hermétiquement la plaie en attirant les globules rouges et les plaquettes à charge négative. Le pansement devient rouge très foncé à mesure qu'il se lie au sang.



6. Placer un rouleau de coton stérile sur le pansement et demander au patient de faire pression en mordant doucement pendant deux minutes. On peut aussi utiliser un gant sec ou un instrument sec pour stabiliser le pansement.



7. Retirer le rouleau de coton d'un geste de balayage latéral pour éviter de déloger le pansement de l'alvéole.



8. La plaie est hermétiquement fermée et le caillot est stabilisé. En raison des capacités autoadhésives des pansements, des points de suture ne sont pas nécessaires mais peuvent être posés selon les préférences du médecin.

Remarque : Ne jamais utiliser de suture primaire avec le pansement dentaire HemCon, car celui-ci doit être en contact avec le milieu buccal pour assurer sa dissolution normale.




9. Site cicatrisé. Le pansement se dissout en général sous 48 heures, mais peut prendre jusqu'à sept jours. À sept jours, la plaie peut être irriguée pour assurer l'élimination de tout matériau résiduel.

Remarque : Ce guide est à des fins éducatives seulement.

Consulter le mode d'emploi du pansement dentaire HemCon (RM7106, Rév. 1) pour obtenir des instructions complètes.

Site donneur de greffe gingivale libre

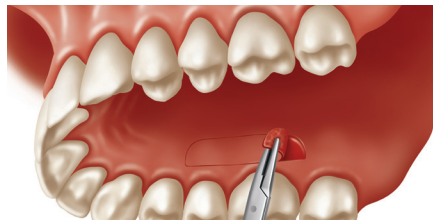


1. Prélever la greffe gingivale libre. Ne pas aspirer ni essuyer le sang.




2. Découper le pansement dentaire HemCon de sorte à ce qu'il s'adapte à l'intérieur de l'alvéole d'extraction sans trop la combler.


Remarque : Les deux côtés du pansement sont actifs.

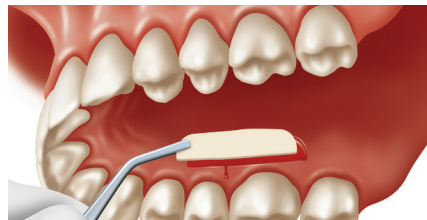

3. Avec un instrument sec et propre, poser le pansement découpé dans la plaie. Le pansement dentaire HemCon est d'une efficacité optimale lorsqu'il est en présence d'une quantité de sang suffisante pour mouiller la surface de contact. Si une irrigation ou une aspiration est utilisée, laisser le sang s'accumuler avant de poser le pansement.

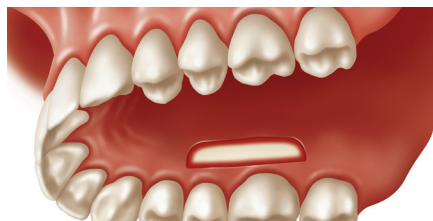


4. Les pansements dentaires HemCon sont autoadhésifs en raison de leur charge en ions positifs. Dès qu'il est posé, le pansement commence à refermer hermétiquement la plaie en attirant les globules rouges et les plaquettes à charge négative. Le pansement devient rouge cerise foncé à mesure qu'il réagit avec le sang.

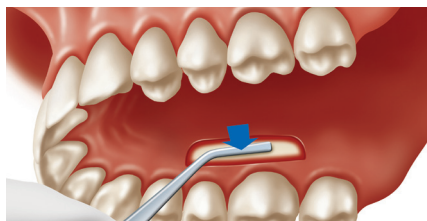


5. Stabiliser le pansement par pression directe à l'aide d'un instrument sec. Vérifier que le pansement est correctement placé initialement; ses capacités autoadhésives peuvent être compromises s'il est exposé au sang puis repositionné.

Remarque : Pour éviter d'adhérer à l'instrument, vérifier que celui-ci est bien sec.

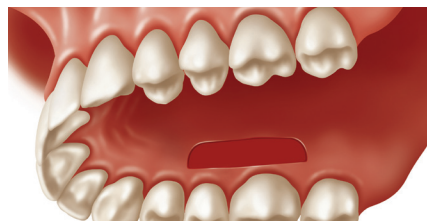


6. La plaie est hermétiquement fermée et le caillot est stabilisé.

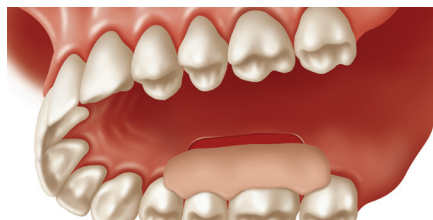

7. Protéger le pansement et la plaie des mouvements de la langue à l'aide d'un pansement parodontal ou d'un stent.

Remarque : Laisser une partie du pansement exposée, car celui-ci doit être en contact avec le milieu buccal pour assurer sa dissolution normale.

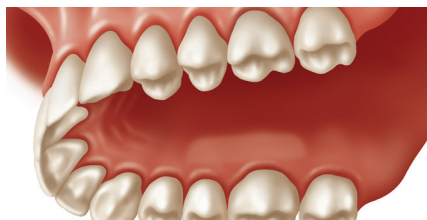

8. Site cicatrisé. Le pansement se dissout en général sous 48 heures, mais peut prendre jusqu'à sept jours. À sept jours, la plaie peut être irriguée pour assurer l'élimination de tout matériau résiduel.

Pour des questions ou pour faxer une commande :

États-Unis : +1 800 854-7019
Fax +1 888 225-2483

États-Unis : +1 760 929-4300
Fax +1 760 431-7811

Australie : +61 (0)2 9950 5434
Fax +61 (0)2 9975 3594

Canada : +1 905 567-2073
or 1 800 265-0968
Fax +1 905 567-2076

Chine : +86 21 22115147
Fax +86 21 22115047

France : +33 (0)1 45 12 35 35
Fax +33 (0)1 45 60 04 88

Allemagne : +49 (0)761 1 56 47 0
Fax +49 (0)761 1 56 47 490

Israël : +972 (0)3 6124242
Fax +972 (0)3 6124243

Italie : +39 043 855 5573
Fax +39 043 855 3181

Espagne : +34 93 846 05 43
Fax +34 93 845 43 25

www.zimmerdental.com

Compte client _____

Livrer à : Nom du médecin _____

Téléphone (_____) _____

Adresse _____

Ville _____

Province _____ Code postal _____

Date de commande _____

Commandé par _____